

## Lympha Press PCD-51

Lympha Press anvendes på sygehuse, i klinikker og i eget hjem.

Har du en kronisk lidelse og brug for Lympha Press som et varigt hjælpemiddel, kan du søge din kommune om en bevilling efter servicelovens paragraf 112.



Nylon armmanchet



Nylon benmanchet



Personlig benmanchet



Nylon benmanchet

Kontakt os for mere information, råd og vejledning.

Se instruktionsvideoerne på [www.lymphapress.dk](http://www.lymphapress.dk) under fanen 'instruktionsvideoer'



Lyngsø Alle 3 | DK-2970 Hørsholm

Tlf.: 32 97 15 25 | [ks@apodan.dk](mailto:ks@apodan.dk) | [www.lymphapress.dk](http://www.lymphapress.dk) | CVR Nr: DK 14 12 38 49

09/20

Apodan anvender FSC®, ECF og European Ecolabel godkendt papir.



# Informationsfolder

Kompression på ødem - letter dit problem



4-KAMMER KOMPRESSIONSPUMPE



## Formålet med at anvende Lympha Press PCD-51

At hjælpe dig af med problemer i arme eller ben som ødem (væskeophobning), spændt væv, tyngdefornemmelse og evt. sår og smerter, når dit lymfe- eller venesystem ikke fungerer godt nok.

## Metoden

Lympha Press arbejder i princippet som dine fingre, når du skal tømme en tube tandpasta for det sidste indhold. Du skubber et par gange på tuben med dine fingre opad mod tubens åbning.

Lympha Press PCD-51 kompressionssystemet består af en pumpe med en eller to manchetter, der hver indeholder fire overlappende kamre. Kamrene fyldes med luft i retning mod kroppen, hvorefter der er en pause, inden luftopfyldningen starter igen.

Lufttrykket føles som en blød rullende massage. Virkningen er, at lymfe- og venesystemet stimuleres, og væsken presses væk fra arm eller ben, så ødemet blødgøres og generne formindskes.

Det er individuelt hvor længe du skal anvende Lympha Press pr. gang, hvilket tryk i mmHg og hvor mange gange dagligt.

Fagudtrykket er intermitterende pneumatisk kompression. (IPC)

## Hvordan anvendes det?

Lympha Press PCD-51 er meget let at anvende. Du skal bare sætte dig behageligt eller ligge ned, og tage manchetten på arm eller ben.

Tænd for pumpen og tryk på start, så får du intermitterende kompression i den indstillede tid ved det valgte tryk.



## 14 dages gratis lån

Du kan gratis låne Lympha Press i 14 dage af Apodan for at prøve effekten hjemme hos dig selv. Dog skal du selv betale returfragten.


Udlån kræver at en sundhedsfaglig person vurderer, at du er egnet til brug af Lympha Press.

### Ben med ødem



Før og efter forløb med IPC

### Vanskeligt helende sår

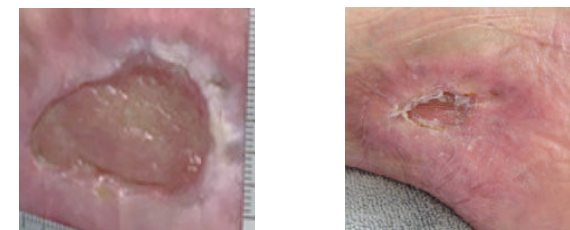

Før og efter forløb med IPC