

QUICKGUIDE

LYMPHA PRESS MINI PRESS



LYMPHA PRESS KOMPRESSIONSSYSTEM:

Lympha Press er et kompressionssystem, som giver lufttrykmassage.

Det består af en pumpe, der forbindes til en manchet via luftslanger.

Det pulserende lufttryk lindrer generne ved bl.a. ødem.

I Lympha Press Mini Press er lufttrykket det samme i alle luftkamre.

Lufttrykket angives i mmHg.

For yderligere information henvises til brugervejledning og instruktionsvideo om håndtering af manchet på hjemmeside:





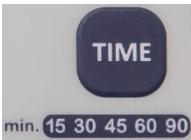

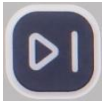

lymphapress.dk

SAMMENKOBLING AF LYMPHA PRESS MINI PRESS OG MANCHET:

- Anbring pumpen på et hårdt og fladt underlag.
- Sæt strømforsyningen ind på venstre side af pumpen og i en egnet stikkontakt. Tænd for stikkontakten.
- Det store stik i slangebundtet sættes ind i Lympha Press Mini Press på forsiden. Det er vigtigt at tage fat i stikket og ikke slangerne, når stikket føres ind i pumpen.
- Pilene på siden af stikket, skal pege opad. Der høres et lille klik, når stikket sidder på plads.
- Det er muligt at anvende to manchetter samtidigt. Hvis man kun anvender en manchet, skal den anden luftudgang i pumpen blokeres med den store blindprop, som vist på foto.



LYMPHA PRESS MINI PRESS REGULERINGSKNAPPER:

Knap	Funktion
	Strømodtag til strømforsyning: Er placeret på venstre side af pumpen.
	Start/Stop knap: Bruges til at starte/stoppe pumpen. Placeret på venstre side af pumpen.
	Time-knap (Tid): Indstilling af kompressionstid. Tidsindikatorer: Lyser ved valgt indstilling af kompressionstid. Tryk på Time-knap , for at indstille tid. Her kan vælges mellem 15, 30, 45, 60 eller 90 min. Når den indstillede tid er gået, slukker Lympa Press Mini Press automatisk.
	Pressure-knap (tryk): Indstilling af tryk (20-80 mmHg). Tryk og hold Pressure-knappen nede, mens du indstiller tryk. Når knappen slippes, er trykket låst.
	Start/Stop-knap: Bruges til at starte eller stoppe kompressionen. Lympa Press Mini Press kan når som helst stoppes, ved at trykke på STOP
	Lysindikator: Hvid - Pumpen er tændt. Kompressionen er ikke startet Grøn - Kompressionen er i gang Rød - Indikerer funktionsfejl (Se brugervejledning)

EFTER ANVENDELSE:

Når pumpen er færdig, tages manchetten af.
Strømforsyningen tages ud af pumpen og stikkontakten.

TRANSPORT:

Ved transport trækkes strømforsyningen ud af pumpen og stikkontakten. Slangebundterne afmonteres fra pumpen ved at trykke ned på kliklåsen og forsigtigt trække stikkene ud af pumpen.
Det hele pakkes i en god taske, som beskytter pumpe og manchet.

RENGØRING:

Strømforsyningen skal være ude af stikkontakten, når pumpen og manchetten aftørres med en fugtig klud eller egnet desinfektionsmiddel. Der må ikke komme væske ind i pumpen.

