

SNABBGUIDE

LYMPHA PRESS MINI PRESS



LYMPHA PRESS KOMPRESSIONSSYSTEM:

Lympha Press är ett kompressionssystem som ger lufttrycksmassage.

Det består av en pump som ansluts till en manschett via luftslangar.

Det pulserande lufttrycket lindrar smärta vid bland annat ödem.

I Lympha Press Mini Press är lufttrycket detsamma i alla luftkamrar.

Lufttrycket anges i mmHg.

För ytterligare information om hantering av manschetten, hänvisar vi till bruksanvisning och instruktionsvideo på hemsidan:





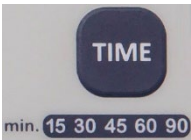

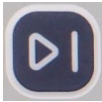

lymphapress.se

ASNLUTNING AV LYMPHA PRESS MINI PRESS TILL MANSCHETT:

- Placera pumpen på ett hårt och plant underlag.
- Anslut elkabeln till pumpens vänstra sida och till ett lämpligt eluttag. Sätt på eluttaget.
- Den stora kontakten i slangbunten ansluts till framsidan av Lympha Press Mini Press. Det är viktigt att hålla i kontakterna och inte i slangarna när kontakten ansluts till pumpen.
- Pilarna på kontaktens sida ska peka uppåt. Det hörs ett svagt klick när kontakten är på plats.
- Det går att använda två manschetter samtidigt. Om du endast använder en manschett, ska den andra luftutgången i pumpen blockeras med den stora blindproppen som det visas på bild.



LYMPHA PRESS MINI PRESS JUSTERINGSKNAPPAR:

Knapp	Funktion
	Uttag för strömförsörjning: Finns på vänster sida av pumpen.
	Start-/Stoppknapp.: Används för att starta/stoppa pumpen. Finns på vänster sida av pumpen.
	Time-knapp (Tid): Inställning av kompressionstid. Tidsindikatorer: Lyser vid vald inställning av kompressionstid. Tryck på Time-knappen , för att ställa in tid. Välj mellan 15, 30, 45, 60 och 90 min. När inställd tid har nåtts, stängs Lympha Mini Press av automatiskt.
	Pressure-knapp (tryck): Inställning av tryck (20–80 mmHg). Tryck och håll nere Pressure-knappen, medan du ställer in trycket. När knappen släpps är trycket låst.
	Start-/Stoppknapp: Används för att starta/stoppa kompressionen. Lympha Press Mini Press kan när som helst stoppas genom att trycka på STOP.
	Ljusindikator: Vit – Pumpen är tänd. Kompressionen har inte startats Grön – Kompressionen är igång Röd – Indikerar funktionsfel (se bruksanvisning)

EFTER ANVÄNDNING:

När pumpen är klar, avlägsnas manschetten.
Avlägsna elkabeln från pump och eluttag.

TRANSPORT:

Vid transport ska elkabeln vara utdragen från pump och eluttag. Slangbuntarna monteras av från pumpen genom att trycka ner klicklåset och försiktigt dra ut kontakterna från pumpen.
Allt packas i en bra väska som skyddar pump och manschett.

RENGÖRING:

Elkabeln får inte vara ansluten till eluttaget när pump och manschett torkas av med fuktig trasa eller lämpligt desinfektionsmedel. Vätska får inte komma in i pumpen.

